

简单检测

预见健康 呵护自己

胶体金产品手册



淘宝天猫旗舰店



京东旗舰店



拼多多旗舰店



快鸽云检小程序



官方微信公众号



客服热线

4000-022-858

天津博奥赛斯生物科技股份有限公司

目 录

呼吸道检测系列	01—05
FluA/B Ag ADV Ag MP Ag RSV Ag 2019-nCoV Ag	
心肌炎症检测系列	06—08
PCT CRP cTnI	
肠道检测系列	09
FOB	
性激素检测系列	10—12
LH HCG FSH	

甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)

用于甲型/乙型流感病毒感染的辅助诊断

注册证编号:国械注准20253400194


便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果


稳定: 有效期25个月



样本采集步骤

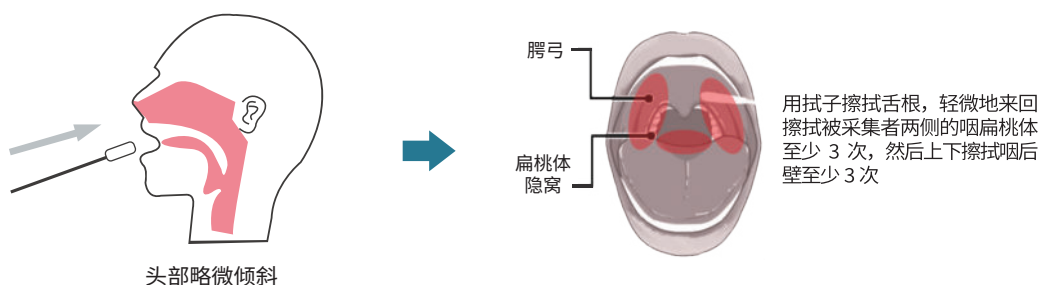

样本检测步骤

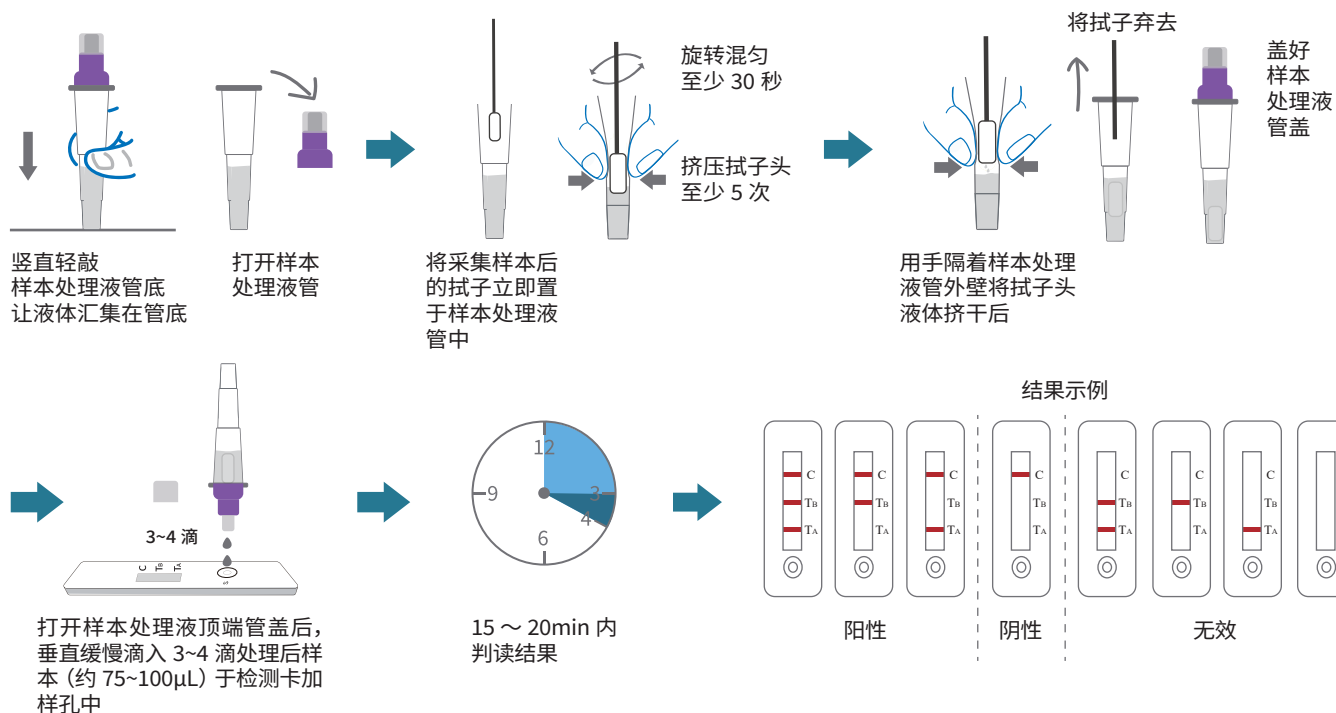

*详细操作请看说明书

腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)

用于呼吸道腺病毒感染的辅助诊断

注册证编号:国械注准20253400441



便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果

稳定: 两年长效期







样本采集步骤

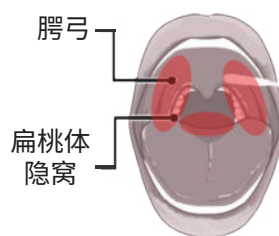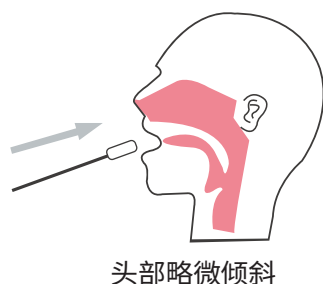

用拭子擦拭舌根, 轻微地来回擦拭被采集者两侧的咽扁桃体至少 3 次, 然后上下擦拭咽后壁至少 3 次

样本检测步骤

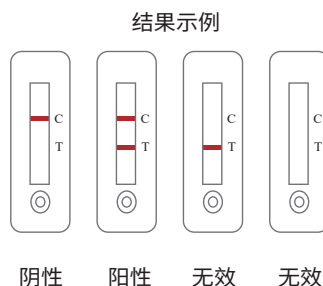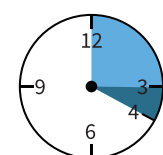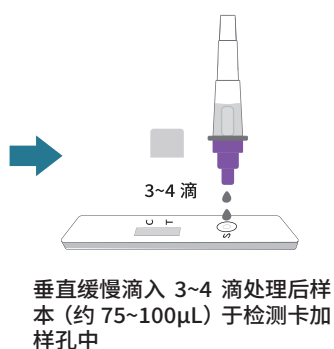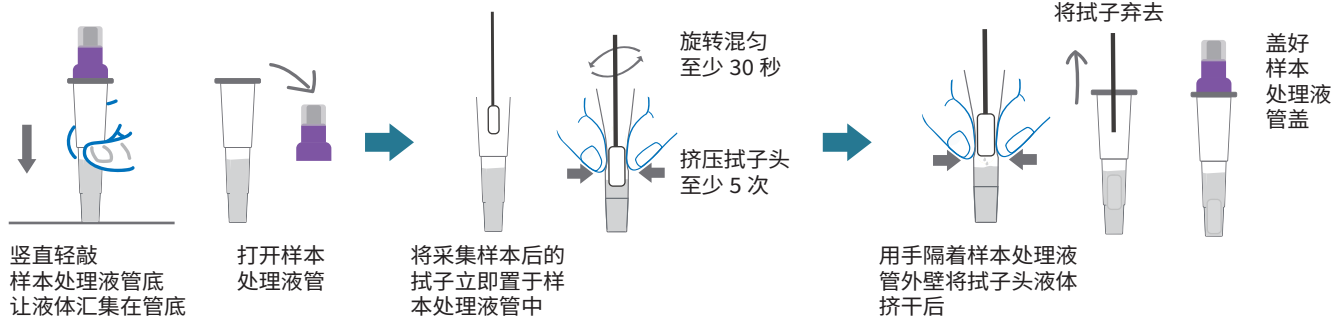

*详细操作请看说明书

肺炎支原体抗原检测试剂盒(胶体金法)

用于呼吸道支原体感染的辅助诊断

注册证编号:国械注准20253401712


便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果


稳定: 两年长效期



样本采集步骤

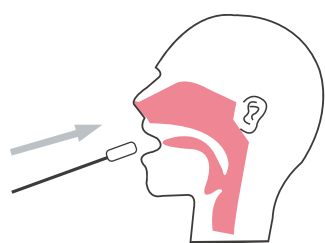


头部略微倾斜

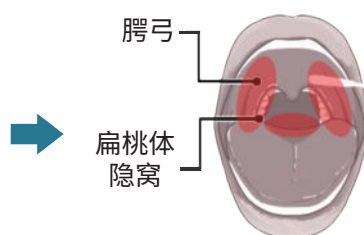

用拭子擦拭舌根, 轻微地来回擦拭被采集者两侧的咽扁桃体至少 3 次, 然后上下擦拭咽后壁至少 3 次。


样本检测步骤

1

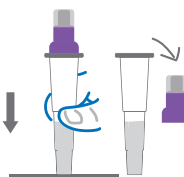


竖直轻敲样本处理液管底, 让液体汇集在管底。打开样本处理液管。

2

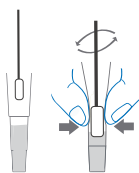


将采集样本后的拭子立即置于样本处理液管中。旋转混匀至少 30 秒。挤压拭子头至少 5 次。

3

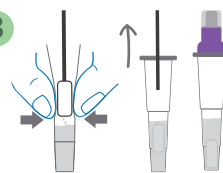

用手隔着样本处理液管外壁将拭子头液体挤干后。将拭子弃去。盖好样本处理液管盖。

4

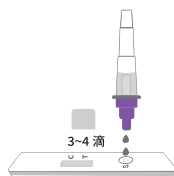

打开样本处理液顶端管盖后, 垂直缓慢滴入 3~4 滴处理后样本 (约 75~100μL) 于检测卡加样孔中。


5



15 ~ 20min 内判读结果。

6

结果示例

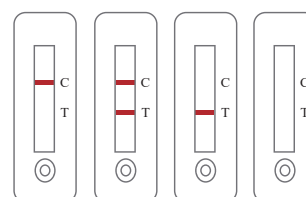

阴性

阳性

无效

无效

*详细操作请看说明书

呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)

用于呼吸道合胞病毒感染的辅助诊断

注册证编号:国械注准20253402093


便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果

稳定: 两年长效期




样本采集步骤

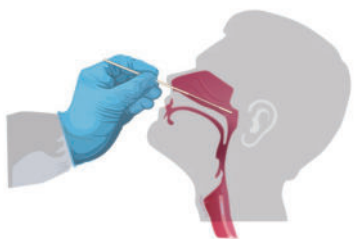


将多余的分泌物从鼻孔去除,通过鼻腔轻轻插入拭子至鼻咽部,在鼻咽黏膜上旋转拭子,并保留 10~15 秒充分采样后,小心取出拭子。


样本检测步骤

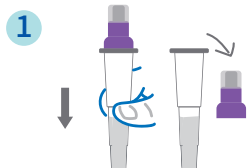


1 竖直轻敲样本处理液管底,让液体汇集在管底,打开样本处理液管。

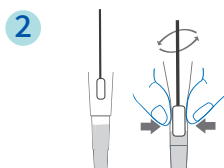


2 将采集样本后的拭子立即置于样本处理液中,旋转混匀至少 30 秒,挤压拭子头至少 5 次。

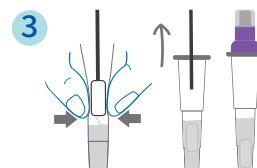

3 用手隔着样本处理液管外壁将拭子头液体挤干后,将拭子弃去,盖好样本处理液管盖。

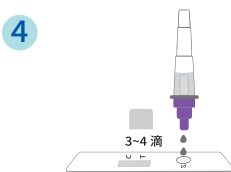


4 垂直缓慢滴入 3~4 滴样本处理液(约 75~100μL)于检测卡加样孔中。

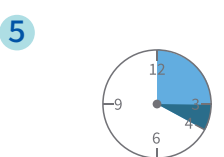

5 15 ~ 20min 内判读结果。

6 结果示例

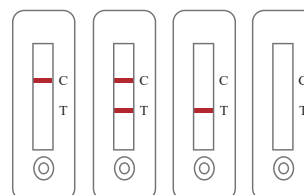

阴性 阳性 无效 无效

*详细操作请看说明书

新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)

用于新冠病毒抗原筛查

注册证编号:国械注准20223400347

便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果

稳定: 两年长效期




样本采集步骤

1



先用卫生纸擤去鼻涕,小心拆开鼻拭子外包装,避免手部接触拭子头。随后头部微仰,一手执拭子尾部贴一侧鼻孔进入。


2

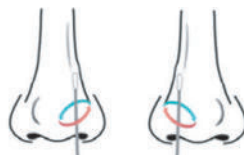

沿下鼻道的底部向后缓缓深入 1-1.5 厘米 (对于年龄 2-14 岁受试者,深入 1 厘米)后贴鼻腔旋转至少 4 圈 (停留时间不少于 15 秒),随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作。


样本测试步骤

1

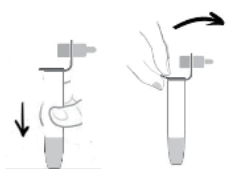


在桌面上竖直轻敲样本处理液管底,让液体汇集在管底,撕开样本处理液管表面的封口膜。

2

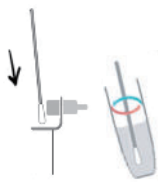

将取样后的拭子浸入到样本处理液中,使样本处理液全部浸润拭子,旋转并挤压拭子至少 10 次。

3

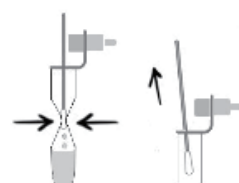

手握样本处理液管壁,挤干采样拭子上的液体,取出采样拭子。

4




盖上样本处理液带孔管盖,采样拭子按照传染性废弃物妥善处理。垂直缓慢滴入 3-4 滴处理后样本 (约 75 ~ 100μL) 于检测卡的加样孔中。

5



请在 15 ~ 20min 内判读结果,少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

6

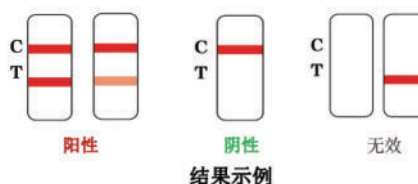

*详细操作请看说明书

C反应蛋白（CRP）检测试剂盒（胶体金法）

用于局部炎症监测,鉴别细菌感染和病毒感染

注册证编号:津械注准20232400361

便捷: 随到随做



快检: 15分钟即可出结果

稳定: 两年长效期



样本采集步骤


采血针使用

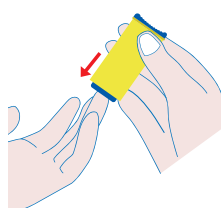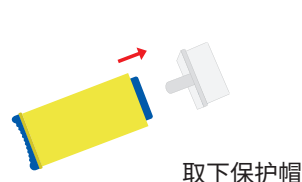

按摩手指,酒精消毒后,将采血器紧贴采血部位,然后按压发射。


全血样本检测

1

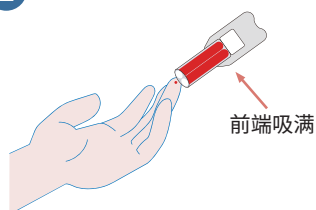


用移液器或滴管吸取待测血清/血浆样本5 μ L,或全血/末梢血10 μ L。

2

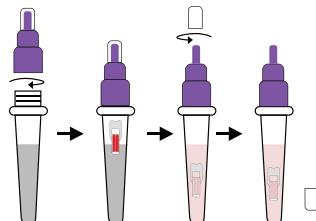


加入到装有样本处理液瓶中,充分混匀。

3

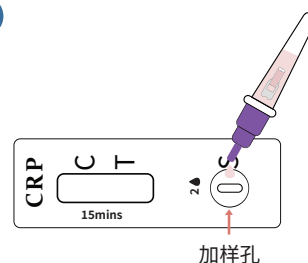

在检测卡加样孔中加入80~90 μ L (约2滴) 稀释后的样本,保证操作过程没有气泡。


4

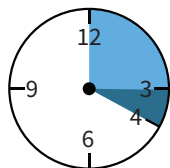

请在15~20min内判读结果,少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

5

检验结果的解释

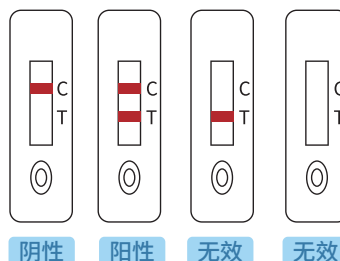

*详细操作请看说明书

降钙素原 (PCT) 检测试剂盒 (胶体金法)

用于全身炎症感染监测

注册证编号: 津械注准20242400016

便捷: 随到随做



快检: 15分钟即可出结果

稳定: 两年长效期




样本采集步骤

采血针使用

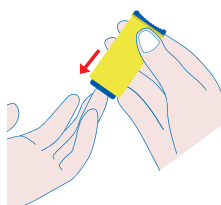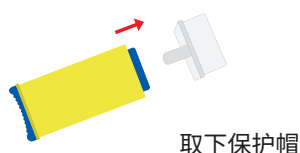


按摩手指, 酒精消毒后, 将采血器紧贴采血部位, 然后按压发射。


全血样本检测

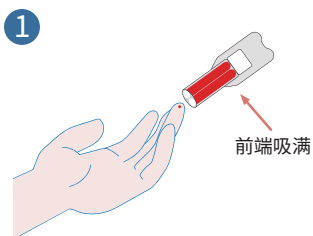


在手指刺破处, 用移液器或滴管吸取待测血清/血浆样本10 μ L, 或全血/末梢血样本20 μ L。

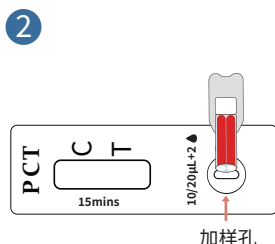

垂直加入到检测卡加样孔中。

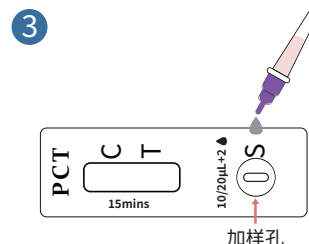


并追加80~90 μ L (约2滴) 样本处理液, 保证操作过程没有气泡。

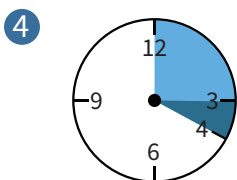

请在完成加样操作后15~20min内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

5 检验结果的解释

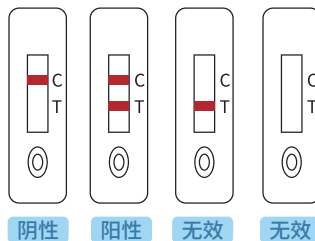

*详细操作请看说明书

心肌肌钙蛋白I (cTnI) 检测试剂盒 (胶体金法)

用于心梗监测

注册证编号:津械注准20242400092

便捷: 随到随做



快检: 15分钟即可出结果

稳定: 两年长效期




样本采集步骤

采血针使用

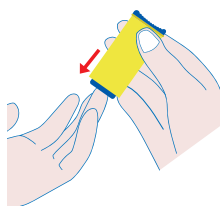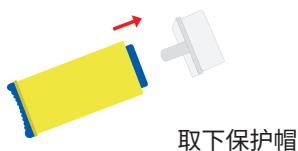


按摩手指, 酒精消毒后, 将采血器紧贴采血部位, 然后按压发射。


全血样本检测

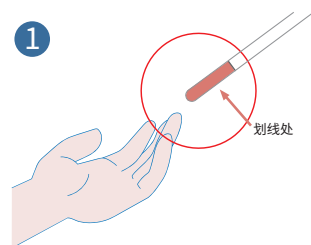


在手指刺破处, 用移液器或滴管吸取待测血清/血浆样本40 μ L (约2滴), 或全血样本60 μ L (约3滴)。

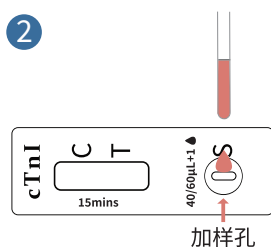

垂直加入到检测卡加样孔中。

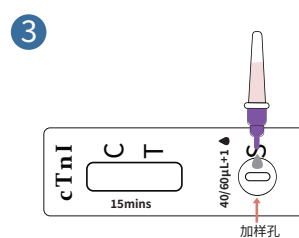


并追加1滴样本处理液, 保证操作过程没有气泡。

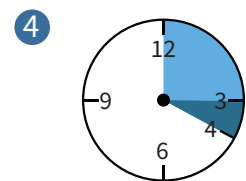

请在完成加样操作后15~20min内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

检验结果的解释

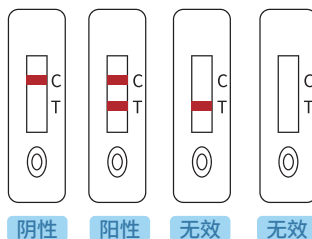

*详细操作请看说明书

大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法）

用于消化道便隐血检测/肠癌筛查

注册证编号：津械注准20242400015

便捷：随到随做

快检：15分钟即可出结果

稳定：两年长效期



样本采集步骤

1




使用采便棒在粪便至少 3 个不同位置取样。

2




将采便棒放入样本处理液管。

3

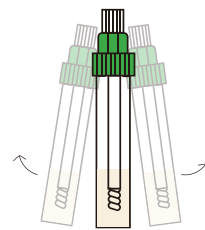


旋紧盖子，充分震荡摇匀。

4

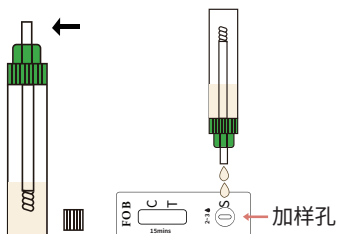

拧开样本处理液管顶端的盖子进行加样，缓慢滴入 2~3 滴（约 60~90μL）处理后样本于检测卡加样孔中，静置。


5

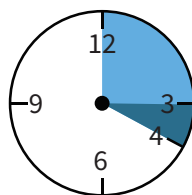

请在 15~20 分钟内判读结果，少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

6

检验结果的解释

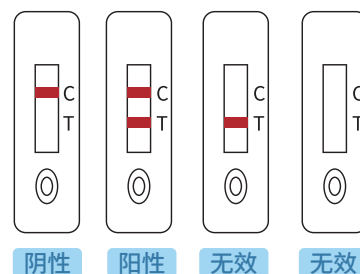

阴性

阳性

无效

无效

*详细操作请看说明书

促黄体生成素（LH）检测试剂盒（胶体金法）

用于排卵监测、助孕

注册证编号：津械注准20242400013

便捷：随到随做

快检：15分钟即可出结果

稳定：两年长效期




规格：笔型、卡型、条型

样本采集步骤


检测卡



1. 尿液样本需为中段尿，应收集在洁净的一次性尿杯或洁净容器内。

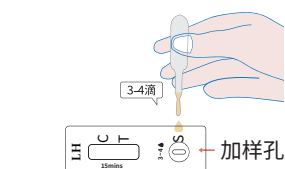


2. 沿铝箔袋切口处撕开，取出检测卡，使用滴管缓慢滴加3-4滴样本或使用移液器量取75~100μL样本于加样孔内，并开始计时。

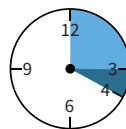


3. 15~20min内判读结果，少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

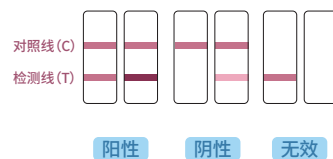


检测笔

检测笔介绍

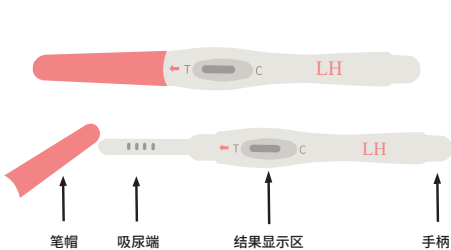


沿铝箔袋切口处撕开，取出检测笔。

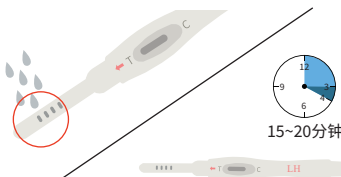

除去笔帽，小便时将尿液直接淋在检测笔的吸尿棒上，注意接尿时不要超过吸尿棒头，待尿液爬至观察口后取出平放于桌面，并开始计时，15~20min内判读结果，少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

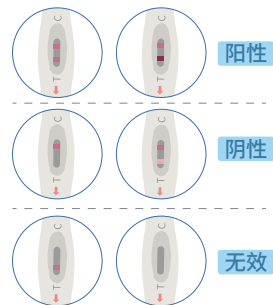

检测条




1. 将加样端浸入到尿液中，浸入深度不低于加样端1/2处，不可超过加样端顶部，浸入持续3秒后平放于桌面，并开始计时。



平放等待15-20分钟

2. 15~20min内判读结果，少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

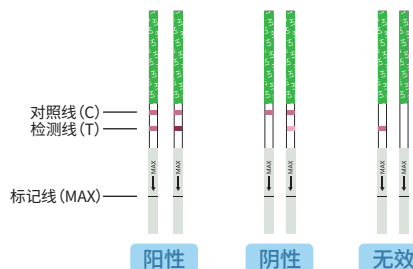

*详细操作请看说明书

人绒毛膜促性腺激素 (HCG) 检测试剂盒 (胶体金法)


用于妊娠早期辅助诊断

注册证编号: 津械注准20242400094

便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果


稳定: 两年长效期

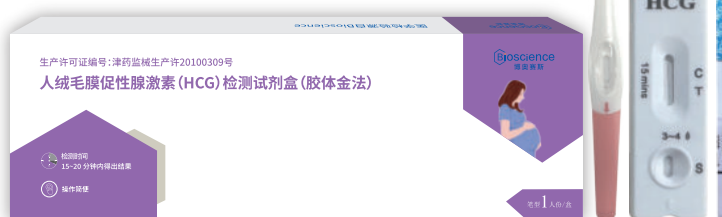


规格: 笔型、卡型、条型

样本采集步骤


检测卡

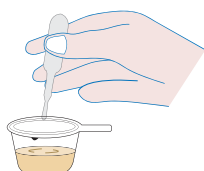

1. 使用尿杯收集中段尿液 (建议采用新鲜晨尿), 用滴管吸取适量的尿液。

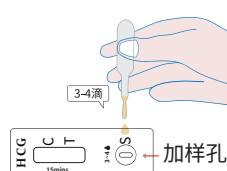


2. 沿铝箔袋切口处撕开, 取出检测卡, 平放于台面上, 使用滴管缓慢滴加3-4滴样本于加样孔内, 并开始计时。

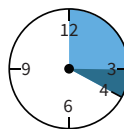


3. 15~20min内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

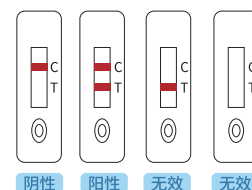


检测笔

检测笔介绍

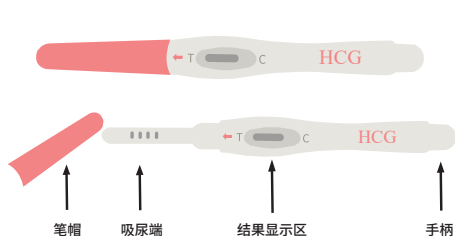


沿铝箔袋切口处撕开, 取出检测笔。

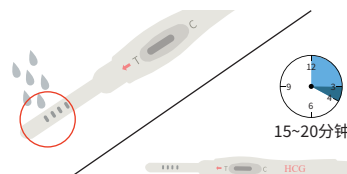

除去笔帽, 小便时将尿液直接淋在检测笔的吸尿棒上, 注意接尿时不要超过吸尿棒头, 待尿液爬至观察口后取出平放于桌面, 并开始计时, 15~20min内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

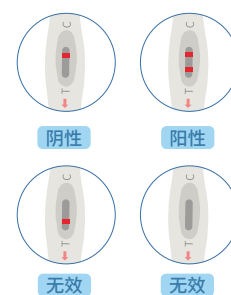

检测条




1. 使用尿杯收集中段尿液 (建议采用新鲜晨尿) 将检测条标“MAX”一端浸入到尿液中, 尿液液面不得超过“MAX”标记线。



平放等待15~20分钟

2. 15~20分钟内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

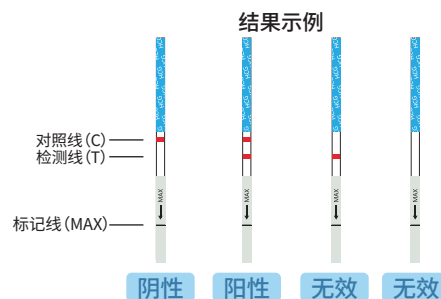

*详细操作请看说明书

促卵泡生成素 (FSH) 检测试剂盒 (胶体金法)


用于更年期或卵巢早衰监测

注册证编号: 津械注准20242400093

便捷: 随到随做

快检: 15分钟即可出结果


稳定: 两年长效期

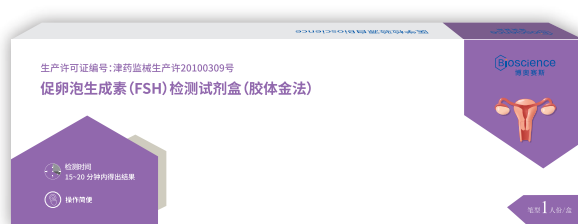


规格: 笔型、卡型、条形

样本采集步骤


检测卡

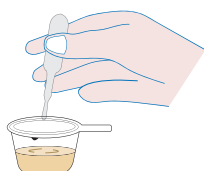

1. 使用尿杯收集中段尿液, 用滴管吸取适量的尿液。

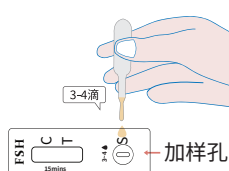


2. 沿铝箔袋切口处撕开, 取出检测卡, 平放于台面上, 使用滴管缓慢滴加3-4滴样本于加样孔内, 并开始计时。

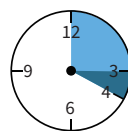


3. 15~20min内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

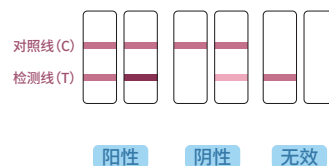


检测笔

检测笔介绍

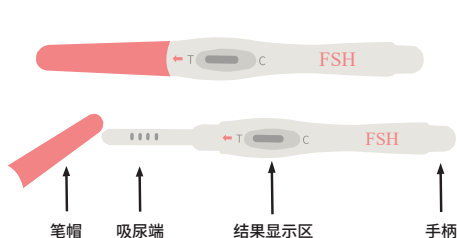


沿铝箔袋切口处撕开, 取出检测笔。

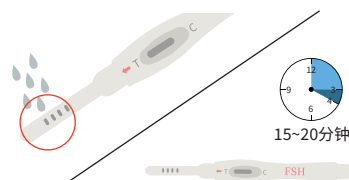

除去笔帽, 小便时将尿液直接淋在检测笔的吸尿棒上, 注意接尿时不要超过吸尿棒头, 待尿液爬至观察口后取出平放于桌面, 并开始计时, 15~20min内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

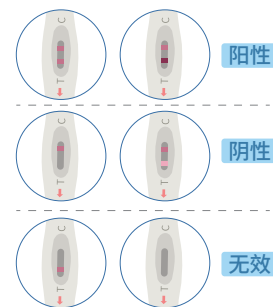

检测条



1. 使用尿杯收集中段尿液, 将检测条标“MAX”一端浸入到尿液中, 尿液液面不得超过“MAX”标记线。




平放等待15-20分钟



2. 检测条浸入持续3秒后平放于桌面, 并开始计时, 15~20分钟内判读结果, 少于或超过该时间判读可能导致错误结果。

结果示例

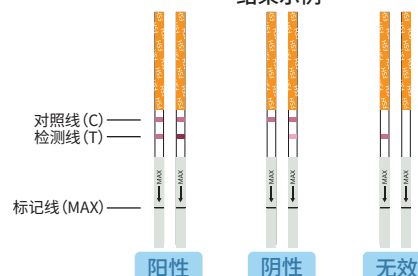

*详细操作请看说明书