



D-二聚体检测试剂盒

进口原料，品质优越

重复性CV<5%，相关性R>0.999，比对偏倚5%

高灵敏度，高特异性


高敏位点（8D3），抗干扰阻断试剂提高特异性

国产优化，方便省心

干粉/液体可选、大小包装可选，稳定性更长

与进口某品牌D-二聚体试剂比对数据（CS系列仪器）：

序号	进口	米度	绝对偏差	偏倚	判断
1#	0.32	0.33	0.01	3%	符合
2#	25.15	24.4	-0.75	-3%	符合
3#	6.92	7.46	0.54	8%	符合
4#	1.85	1.9	0.05	3%	符合
5#	4.12	3.94	-0.18	-4%	符合
6#	2.22	2.21	-0.01	0%	符合
7#	12.3	11.74	-0.56	-5%	符合
8#	2.31	2.39	0.08	3%	符合
9#	0.92	0.9	-0.02	-2%	符合
10#	2.84	2.63	-0.21	-7%	符合
11#	2.25	2.16	-0.09	-4%	符合
12#	1.86	1.82	-0.04	-2%	符合
13#	1.1	1.07	-0.03	-3%	符合
14#	0.58	0.56	-0.02	-3%	符合
15#	1.48	1.4	-0.08	-5%	符合
16#	0.87	0.82	-0.05	-6%	符合
17#	13.86	14.34	0.48	3%	符合
18#	1.27	1.3	0.03	2%	符合
19#	2.86	2.77	-0.09	-3%	符合
20#	5.83	6.04	0.21	4%	符合

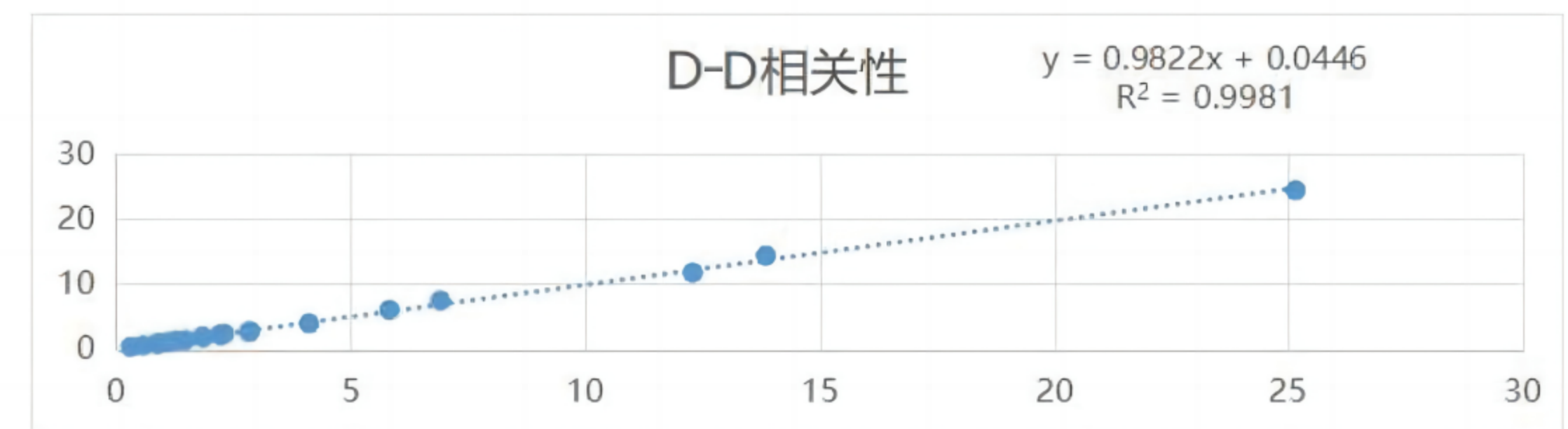

试剂盒技术性能：

- 兼容性：试剂可兼容主流进口品牌的多种凝血分析仪。
- 抗体位点：高敏位点8D3，并采用FEU报告单位。
- 抗干扰性：含特殊的异嗜性抗体阻断剂，提高抗干扰性。
- 检出限：最低检出限0.03mg/L FEU。
- 重复性：低值变异系数CV < 15%，高值变异系数CV < 10%。
- 线性范围：在[0.2~4.3]mg/LFEU范围内，线性相关系数r>0.990。
- 试剂稳定性：开瓶后，2~8℃环境下可稳定28天。

米度医疗科技（中山）有限公司

地址：广东省中山市火炬开发区祥兴路6号数贸大厦北翼7层
电话：0760-87886006



粤械注准20222400783

D-二聚体测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法)	试剂：3×4.0mL（冻干）；缓冲液：3×5.0mL；补充试剂：3×2.6mL；样本稀释液：3×5.0mL；校准品：1×1.0mL
D-二聚体测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法)	试剂：6×4.0mL（冻干）；缓冲液：6×5.0mL；补充试剂：6×2.6mL；样本稀释液：6×5.0mL；校准品：2×1.0mL
D-二聚体测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法)	试剂：3×4.0mL（液体）；缓冲液：3×5.0mL；补充试剂：3×2.6mL；样本稀释液：3×5.0mL；校准品：1×1.0mL
D-二聚体测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法)	试剂：6×4.0mL（液体）；缓冲液：6×5.0mL；补充试剂：6×2.6mL；样本稀释液：6×5.0mL；校准品：2×1.0mL